

**Hydro-Jet**   
**System France**  
 Créateur de massages...

Hydro-Jet System France |  
 Parc d'activités de Launay - Bât AD Net - 14 130 PONT L'EVEQUE - Fax 02 31 81 91 68

 **N°Azur 0 810 400 423**  
 (coût d'un appel local)

email : [info@hydrojetsystem-france.com](mailto:info@hydrojetsystem-france.com) - [www.hydrojetsystem-france.com](http://www.hydrojetsystem-france.com)

18 8735 02 04/05

**wellsystem™** \_ **MEDICAL**

# PHYSIO POINT

GAGNEZ DES  
PATIENTS FIDÈLES

by wellsystem™

DRY WATER  
MASSAGE



[www.hydrojetsystem-france.com](http://www.hydrojetsystem-france.com)

MARQUER DES POINTS ET FIDELISER LES PATIENTS AVEC  
L'HYDROMASSAGE À SEC



wellsystem™ \_ MEDICAL



wellsystem™ MEDICAL

# PHYSIOPOINT

## CONNAISSEZ-VOUS L'« HYDROMASSAGE À SEC » ?

Le Wellssystem Medical constitue le perfectionnement technique de l'hydrojet de Wellssystem qui a fait ses preuves dans les cabinets depuis 1992.

### SIMPLEMENT S'ALLONGER

Tout habillé – sans changer de vêtements, sans se doucher après usage. Il suffit de s'allonger en toute détente sur la surface de couchage douce en caoutchouc naturel.

### SIMPLEMENT SE RELAXER

Une utilisation stimulante allant de la douceur au massage énergétique. Des jets d'eau chaude sont projetés en mouvements circulaires réguliers sur le dessous de la surface de couchage en caoutchouc naturel et massent le corps de la tête aux pieds.

### UTILISER EN TOUTE SIMPLICITÉ

La commande se fait au moyen d'un joystick avec un clavier « soft touch ». Des pictogrammes auto-explicatifs rendent l'utilisation extrêmement simple. Trois types d'utilisation sont possibles : des programmes fixes avec 3 cartes à puce différentes (« Medical 1, 2 et 3 »), la carte à puce vierge que le thérapeute peut programmer à sa guise et la sélection individuelle avec le joystick.

### SIMPLEMENT SOIGNER

Le massage sur simple pression d'une touche est le complément idéal du concept de votre cabinet. Avec ces prestations sanitaires individuelles, étendez votre offre de prestations pour fidéliser vos patients à long terme. Le Wellssystem Medical conjugue l'hydromassage à sec grâce à la force de l'eau et aux bienfaits de la chaleur stimulant la circulation et activant l'ensemble du métabolisme.

### LE PRINCIPE

Le Wellssystem Medical est rempli de près de 300 litres d'eau. Deux buses font jaillir l'eau contre la surface de couchage en caoutchouc naturel. Elles sont commandées automatiquement par des programmes à cartes à puce ou au moyen du joystick. La température de l'eau est réglée au préalable par l'exploitant entre 25° et 40°, et la durée du massage entre 15 et 45 minutes.

### L'UTILISATION

L'hydromassage à sec se fait habillé – sans changer de vêtements et sans se doucher après usage. L'utilisation est extrêmement conviviale et peut s'effectuer de trois façons :

1. Fortement recommandé et simple : le système de cartes à puce. Les cartes à puce contiennent des programmes de massage qui ont été élaborés en coopération avec des kinésithérapeutes et des médecins du sport. Le patient lance tout simplement le programme que vous lui avez prescrit, avec la carte à puce correspondante (« Medical 1, 2 et 3 »). La pression est variable.
2. En cas d'utilisation de la carte à puce à programmation libre, vous composez vous-même les programmes pour vos patients et les enregistrez sur leurs cartes à puce.
3. Dans le cadre d'une utilisation individuelle, il est possible de sélectionner soi-même et à tout moment le type et la zone de massage et la pression.

### L'EFFET

Le Wellssystem Medical assure un maximum de relaxation et d'assouplissement en associant pour la première fois la chaleur et la force de l'eau. Une utilisation de 15 minutes suffit déjà pour éliminer les contractions musculaires et activer précieusement le métabolisme. Le complément thérapeutique idéal de l'offre de votre cabinet.

### LES FONCTIONS EN UN COUP D'ŒIL

- **PRESSION DE 0,5 À 4 BARS**
- **MASSAGE CORPOREL COMPLET**
- **MASSAGE DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS**
- **MASSAGE DU BUSTE**  
(SPÉCIFIABLE POUR LA RÉGION DES ÉPAULES ET LA RÉGION LOMBAIRE)
- **MASSAGE SECTIONNEL (CONCENTRÉ SUR UNE SECTION DE 15 CM, SECTION VOULUE SÉLECTIONNABLE)**
- **MASSAGE PONCTUEL (MASSAGE CONCENTRÉ SUR UN CERTAIN POINT DOULOUREUX)**
- **MASSAGE À PULSATIONS**
- **MASSAGE FINAL APAISANT**






# À QUEL PATIENT POUVEZ-VOUS RECOMMANDER LE WELLSYSTEM MEDICAL ?

## DÉTENTE

Nombre de vos patients sont sous l'emprise d'un stress permanent – pour des raisons professionnelles ou familiales. Les changements sociaux ou les craintes de l'avenir les préoccupent fortement. Ils ne se consacrent pas assez de temps. Avec le Wellsystem Medical, vous leur offrez une possibilité de relaxation idéale aux multiples bienfaits sur leur santé.

## THÉRAPIE

Les patients souffrant de douleurs dorsales ou d'autres maux chroniques ont besoin d'une attention toute particulière de votre part. Avec le Wellsystem Medical, vous complétez de manière optimale votre concept thérapeutique pour ces cas souvent difficiles.

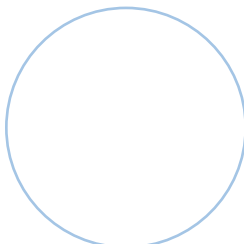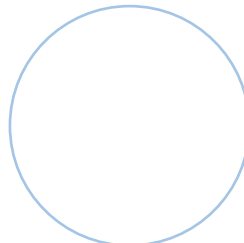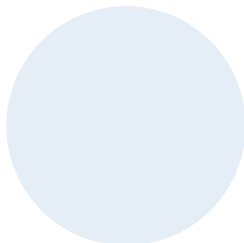

## PRÉVENTION

Cela s'adresse notamment aux personnes s'intéressant à leur santé parmi vos patients. Ils ont une alimentation saine, pratiquent du sport et sont toujours à la recherche d'autres moyens leur permettant de se maintenir en forme, d'activer leur métabolisme et de renforcer leurs défenses. Avec le Wellsystem Medical, vous avez le complément idéal pour le concept de vie de ces patients.

## ASSOULISSEMENT MUSCULAIRE

Les douleurs dorsales proviennent souvent des activités monotones en position assise ou debout (des longues heures assises passées derrière un bureau et/ou ordinateur ou d'efforts corporels particuliers). Au niveau des épaules et de la nuque, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale et des lombaires. Si une lésion plus grave, par exemple une hernie discale, peut être exclue, ces maux proviennent souvent de contractures musculaires ou de durcissements. Avec le Wellsystem Medical, vous avez l'instrument idéal pour le traitement de ces troubles.

# PHYSIOPOINT

## DES POINTS POUR VOTRE CABINET

### CHANGEMENT DE TENDANCE DANS LE COMPORTEMENT SANITAIRE

C'est en optant pour la bonne stratégie que vous gagnerez de nombreux patients fidèles pour votre cabinet. La société a pris conscience que chaque individu doit désormais contribuer individuellement à promouvoir sa santé, profitez-en. Vos patients sont de plus en plus motivés à s'investir dans la conservation de leur santé, leur forme et leur aptitude à travailler.

### INDICATIONS MULTIPLES

Les indications possibles pour l'utilisation du Wellssystem Medical sont très diversifiées.

- Augmentation ou réduction du tonus musculaire
- Augmentation locale de la circulation sanguine et du métabolisme
- Assouplissement du tissu cellulaire sous-cutané
- Décongestionnement veineux et lymphatique
- Apaisement réflectoire des douleurs
- Résorption du tissu cicatriciel
- Activation ou stabilisation du système nerveux végétatif aux effets bénéfiques sur les organes internes.
- Intensification de l'efficacité des mesures thérapeutiques ultérieures (extensions, thérapie manuelle, rééducation etc.)

- Dysfonctionnements réversibles de la colonne vertébrale
- Lumbago subaigu
- Fibromyalgie (légère forme)
- Dystonie physiovégétative
- Excès de fatigue musculaire
- Syndromes douleurs en bas et en haut de la colonne vertébrale, syndrome lombaire
- Migraine cervicale
- Periarthritisme humeroscapularis avec contractures musculaires correspondantes
- Scoliose, kyphose
- Déficit du trapèze et contractures
- Syndrome cervico-brachial

### VOTRE POINT FORT

Les possibilités d'utilisation du Wellssystem Medical sont multiples. D'une part pour réaliser les massages dont les coûts sont pris en charge par les caisses d'assurances maladies privées. D'autre part en tant que prestations sanitaires individuelles. Que vos patients souffrent de symptômes de stress ou exercent une activité qui sollicitent particulièrement les muscles des épaules et de la nuque. Le Wellssystem Medical assouplit et décontracte les muscles grâce à la force de l'eau. La chaleur bienfaisante stimule la circulation sanguine, active l'ensemble du métabolisme et a un effet relaxant.

**AVEC LE WELLSYSTEM MEDICAL, VOUS AVEZ LE CONCEPT DE THÉRAPIE ADAPTÉ À CHACUN DE VOS PATIENTS : LE WELLSYSTEM MEDICAL EST SYNONYME DE MASSAGE INDIVIDUEL, TOUT HABILLÉ – SANS CHANGER DE VÊTEMENTS, SANS SE DOUCHER APRÈS USAGE, POUR UNE DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE ET UNE GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION.**






ENTDECKEN SIE DEN

# PHYSIO POINT

wellness  
wellness

ÜBERWASSER  
PASSAGE






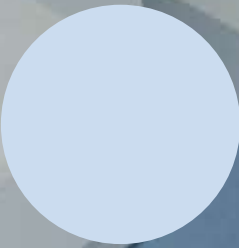


# PHYSIO POINT

## EMPLACEMENTS DANS LE CABINET

**WELLSYSTEM MEDICAL – PLUS QU'UN  
SIMPLE LIT DE MASSAGE.  
DERRIÈRE SE CACHE UNE IDÉE DE  
THÉRAPIE ÉVOLUTIVE.**

Le Wellsystem Medical est un salon de massage complet nécessitant un minimum d'espace dans votre cabinet. Avec le système de rideau Physio Point, vous créez un espace de thérapie dans un espace restreint. De légères bandes de tissu et des couleurs agréables contribuent à la détente maximale de vos patients. Elle procurent une sensation de sphère personnelle sans se sentir à l'étroit.

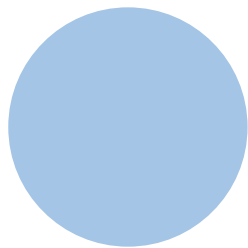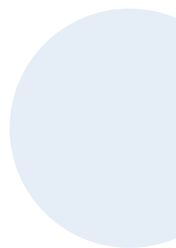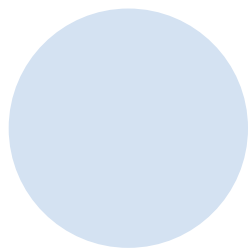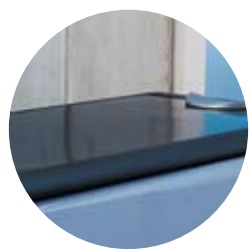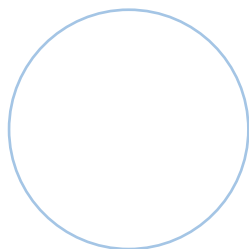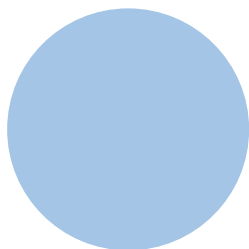

## COMMENT INFORMER VOS PATIENTS ?

### **BROCHURE D'INFORMATIONS**

#### **« HYDRO-MASSAGE À SEC ADAPTÉ À CHAQUE EXIGENCE ! »**

Cette brochure permet d'informer vos patients sur le Wellsystem Medical et les invite à l'utiliser.

Posez les brochures dans votre salle d'attente et à l'accueil. Vous pouvez bien sûr utiliser cette information pour une consultation personnelle.

### **BROCHURE D'UTILISATION**

#### **« WELLSYSTEM MEDICAL »**

La brochure explique étape par étape l'utilisation du Wellsystem Medical aux collaborateurs de votre cabinet.

### **IMAGE POSTER « PHYSIO POINT »**

Il présente les caractéristiques les plus importantes du Wellsystem Medical et peut être placé près du Physio Point ou à des endroits clés du cabinet de façon à attirer l'attention sur l'offre.





### **FLYER**

#### **« DÉCOUVREZ LE PHYSIO POINT »**

Le flyer attire l'attention de vos patients sur le Wellsystem Medical. Il informe de manière claire et succincte sur les avantages et les possibilités d'utilisation du Wellsystem Medical. Ainsi, les patients se souviendront toujours du Physio Point. Avec le bon d'essai gratuit inclus, vous pouvez proposer aux patients intéressés de tester une séance d'hydromassage à sec.

### **CARTE DE FIDÉLITÉ « POINTSBOOK »**

Chaque patient qui décide de souscrire une cure d'hydromassage à sec avec le Wellsystem Medical, reçoit une carte de fidélité qui servira en même temps à inscrire les rendez-vous. Au bout de la 9<sup>e</sup> séance, les utilisateurs bénéficieront d'une 10<sup>e</sup> séance gratuite.

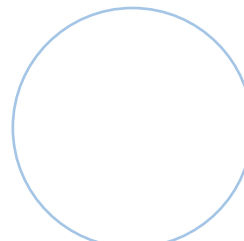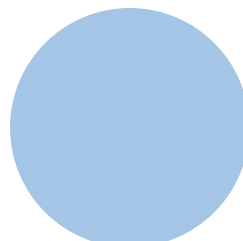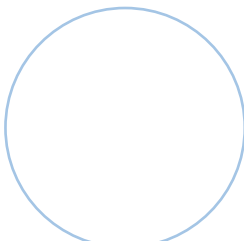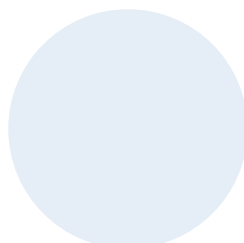

# PHYSIOPOINT

## ET COMMENT ALLEZ-VOUS LE DIRE AUX COLLABORATEURS DE VOTRE CABINET ?

### CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE :





LE WELLSYSTEM  
MEDICAL PEUT ÊTRE UN  
INSTRUMENT AVANTA-  
GEUX POUR TOUS LES  
MEMBRES DU CABINET  
ET POUR VOUS-MÊME  
– RELAXATION BIENFAI-  
SANTE POUR ÉLIMINER  
LE STRESS ET LES CON-  
TRACTURES  
MUSCULAIRES.

Nous conseillons à chacune des personnes travaillant dans votre cabinet de tester au moins une fois le Wellsystem Medical afin de connaître ses avantages et de pouvoir mieux expliquer son utilisation.

Présentez à vos collaboratrices et collaborateurs le kit d'informations et son fonctionnement de façon à ce qu'il soit apprécié et souvent utilisé.

### LE KIT D'INFORMATIONS

- Brochure d'informations  
« Hydromassage à sec adapté à chaque exigence ! »
- Brochure d'utilisation  
« Wellsystem Medical »
- Image poster « Physio Point »
- Flyer « Découvrez le Physio Point »
- Carte de fidélité « Pointsbook »

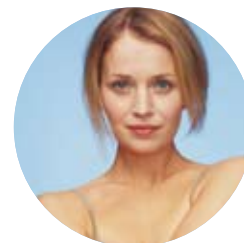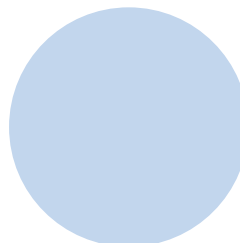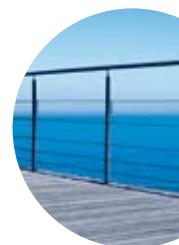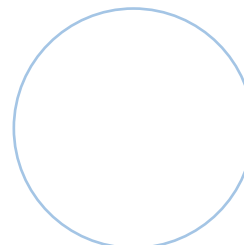

# INVESTISSEMENT LUCRATIF DANS LE VIF DU SUJET

Les frais d'acquisition relativement peu élevés et les offres de leasing avantageuses du Wellystem Medical mettent en valeur sa rentabilité. Le Wellystem Medical est amorti, déjà avec 2 utilisations par jour en moyenne, et sur une durée de leasing de 48 mois.

## CALCUL MODÈLE MENSUEL

basé sur un massage de 15 minutes pour 10,00 €

### AVEC 8 PATIENTS PAR JOUR

Recette :	1600.00 €
Leasing :	approx. -378.00 €
Frais d'exploitation :	-30.00 €
Bénéfice :	1192.00 €

### AVEC 6 PATIENTS PAR JOUR

Recette :	1200.00 €
Leasing :	approx. -378.00 €
Frais d'exploitation :	-25.00 €
Bénéfice :	797.00 €

### AVEC 4 PATIENTS PAR JOUR





Recette :	800.00 €
Leasing :	approx. -378.00 €
Frais d'exploitation :	-20.00 €
Bénéfice :	402.00 €

**OPTION : le Medical Premium Full Service (garantie sur toute la durée de fonctionnement, vérification et maintenance incluses 1 fois par an)**

## BASE DE CALCUL :

**DURÉE DU LEASING : 48 MOIS  
0% D'ACOMPTE, 1 % DE VALEUR  
RÉSIDUELLE. ENREGISTREMENT DES  
FRAIS D'EXPLOITATION MENSUELS ;  
COMPRENANT FRAIS D'ÉLECTRICITÉ,  
D'EAU ET DE PRODUITS DE NETTOY-  
AGE, À L'AIDE DE VALEURS COMPARA-  
TIVES MOYENNES.**

**LES RECETTES SE BASENT SUR 8 À  
10 HEURES D'OUVERTURE ET SUR  
20 JOURS DE TRAVAIL PAR MOIS EN  
MOYENNE.**

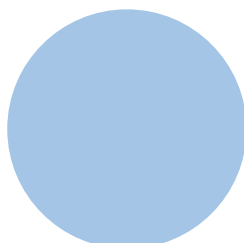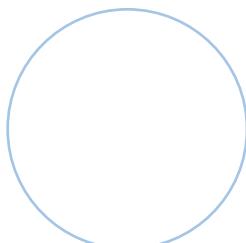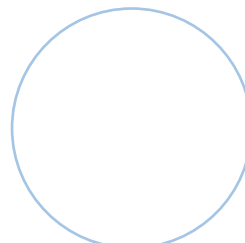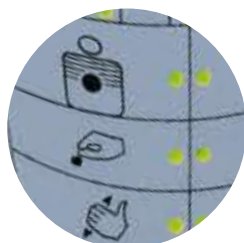

# PHYSIOPOINT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WELLSYSTEM MEDICAL

**CONCEPT DE RÉUSSITE :**  
**LE COMPLÉMENT IDÉAL DES**  
**PRESTATIONS DE VOTRE**  
**CABINET :**  
**RÉALISATION DE MAS-**  
**SAGES THÉRAPEUTIQUES**  
**PRESCRITS DANS VOTRE**  
**CABINET.**

**UTILISATION ADITIONNELLE**  
**EN TANT QUE PRESTATIONS**  
**SANITAIRES INDIVIDUELLES**  
**AVEC UNE FIDÉLISATION CLI-**  
**ENTS ASSURÉE. UNE GAMME**  
**DE PRESTATIONS ÉTENDUE**  
**AVEC UN MINIMUM DE TRA-**  
**VAIL ET D'EFFORT POUR LES**  
**COLLABORATEURS(TRICES)**  
**ET LES PATIENTS.**

### ÉQUIPEMENT D'UTILISATION

- Joystick avec clavier tactile
- Indicateur LED signalant la durée de massage écoulée
- Zones et types de massage sélectionnables
- Indicateurs LED pour les pressions
- Appuie-tête

### EQUIPEMENT CONFORT

#### [OPTIONS]

- Lot de cartes à puce vierge
- Housse noire
- Système de rideau « Physio Point »
- Cabine complète « Physio Point »

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS [EN SÉRIE]

- Durée max. de l'utilisation : 45 minutes
- Pressions : 0,5 – 4 bars
- Température de l'eau : 25 – 40 °C
- Dimensions de l'appareil (Longueur x Largeur x Hauteur) : 2.150 x 1 060 x 570 mm
- Surface de couchage (Longueur x Largeur) : 1.950 x 800 mm
- Poids de l'appareil vide : 149 kg
- Volume d'eau : env. 304 l
- Consommation : env. 3 000 watts
- Raccordement / protection : 220 – 240 V / ~1 N / 16 A
- Interface IR pour PC
- Interface pour tous les systèmes de commande courants
- Homologué GS (TÜV)
- Homologué CCA
- Homologué CEM
- Sigle CE

(Sous réserves de modifications en terme d'exécution technique, design et disponibilité)

